



UTTRYCKSFULLA FÄRGER FÖR INDIVIDUELL KARAKTÄRISERING



LJUSPOLYMERISERING GER MÖJLIGHETER TILL KREATIVT SKAPANDE


Dagens patienter har mycket höga förväntningar och vill ha ett resultat som är så naturligt som möjligt vid rekonstruktionen av anteriora och posteriora tänder, inte bara vid porslins restaurationer.

Utöver formen och funktionen på tanden är dess färgnyans det viktigaste kriteriet för acceptansen av restaurationen, speciellt om det är en veneer eller är tillverkad av keramik av tredimensionellt kompositmaterial som Ceraimage eller Solidex.

Den ljuspolymeriserande infärgningspastan är fluorescerande och anpassar sig till de naturliga omgivande färgerna.

De kan appliceras nästan lika tunt som porslin och polymeriserar utmärkt på ytan tack vare nytvecklade multifunktionella monomerer och fotoinitiatorer.


LITE ART infärgningspastor anpassar sig perfekt för att åstadkomma en inre färgmodifiering i resiner, kompositmaterial, artificiella tänder eller olika kron och bro konstruktioner.

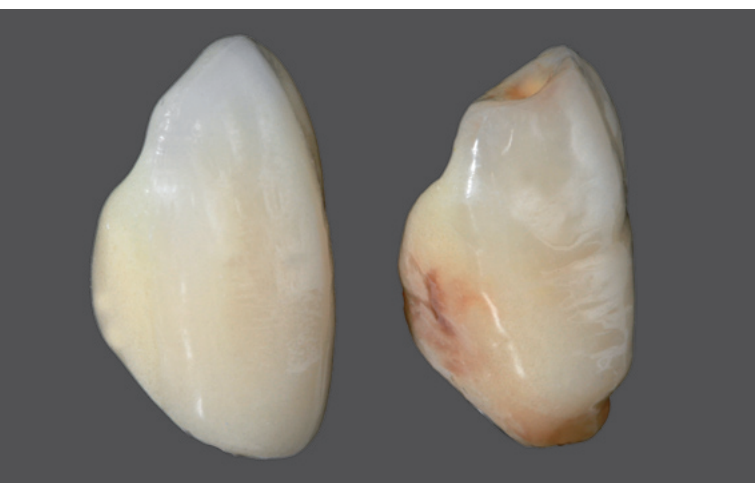

Indikationer

- **Karaktärisering av keramik fyllda och konventionella C & B kompositmaterial**
Kronor/broar, vener, inlays /onlays
- **Färg anpassning till artificiella tänder**
Komposit tänder, akryl tänder
- **Individuell anpassning av protesbaser**
Partiella proteser, gingiva färgat kompositmaterial av teleskop och implantat arbeten samt helproteser
- **Harmonisering av temporära kron och bro konstruktioner och tandfärgat resin**
PMMA kron och bro konstruktioner, lång-tids temporära konstruktioner

Komfortabel applicering, extraordinära täckande egenskaper

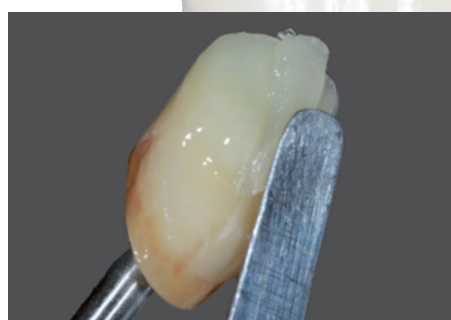

Den höga kvaliteten på LITE ART infärgningspastor framgår redan vid appliceringen, med avtryck med mikrofina partikelstorlekar, homogen konsistens och de extraordinära täckningsegenskaperna trots det tunna skiktet.

Bara genom att täcka de polymeriserade infärgningspastorna med ett incisalt, eller translucert kompositmaterial skikt, åstadkommes en mycket specifik naturlig effekt.

Färg koncept

Färg		Använder exempel					
	Kod	Färg-justering	Cervikalt	Infärgning	Incisalt	Tandkött	Färgmix
White	W			○	○		○
Black	B	○		○			○
Red	R					○	○
A-Shade	AS	○	○				
B-Shade	BS	○	○				
Khaki	K		○	○			
Orange	O	○	○	○			
Blue Gray	BI-G				○		
Violet	V	○			○	○	
Orange Brown	O-Br		○	○	○		
Dark Red Brown	DR-Br		○	○			
Black Brown	B-Br		○	○			
Cyan	Cyan						○
Magenta	Magenta						○
Yellow	Y						○

Alla LITE ART färger kan användas individuellt eller blandas till önskad färg. Alla individuella färger i Vintage Arts porslins system kan åstadkommas genom att blanda de primära färgerna cyan, magenta och gul.

Tolv förblandade färger och färgnyanser som imiterar färgeffekterna från de naturliga tänderna och gingivans färgpigment är tillgängliga för karaktäristisk färgsättning.

Naturlig fluorescence

LITE ART infärgningspasta har en fluorescence mycket lik den för naturliga tänder. Den naturliga effekten kvarstår även under artificiellt ljus.




Under naturligt ljus



Även mörka färger ger vitala och naturliga reflektioner under ultraviolett ljus

Så individuellt som dina patienter önskar

Oavsett om det är klassiska komposit venter, långtids temporära konstruktioner eller artificiella tänder, LITE ART infärgningspasta ger dig möjlighet att implementera individuella lösningar i enlighet med din patients alla önskemål.

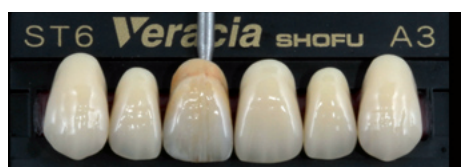

Ök 13-23 och gingivalt individualiseras med LITE ART och Ceramage.

SYSTEM KOMPONENTER

LITE ART Komplet Set

Setet innehåller alla komponenter för autentiska och individuella karaktäriseringar av resiner och porslins förstärkta kompositmaterial.

- 15 färger om 1 ml vardera: A-Shade, B-Shade, White, Black, Red, Khaki, Orange, Blue-Gray, Violet, Orange Brown, Dark Red Brown, Black Brown, Cyan, Magenta, Yellow
- Sprut spetsar / Sprut hättor, 15 st./fp.
- 1 flaska CLEAR LIQUID, 6 ml
- 1 UNI BRUSH No. 5 (1 skaft, 10 borstspetsar)
- Färgskala, bruksanvisning



Beställningsnr. 1970

LITE ART separata färger

Var och en av de 15, klara att använda, separata färgerna, finns i speciellt utvecklade och konstruerade sprutor.

Infärgningspastorna kan doseras på ett ekonomiskt sätt eller t.o.m. appliceras direkt på restorationen med de tunna sprutspetsarna. De försluts säkert med en elastisk sprut förslutnings hätta.

- Spruta 1 ml
- Sprutspets 1 st. / Spruthätta 1 st.



Beställningsnr. 1971 - 1985

CLEAR LIQUID

Den klara att använda infärgningspastan kan justeras till olika intensiteter med CLEAR LIQUID i enlighet med personliga önskemål.

Den naturliga färgsättningen med LITE ART infärgningspastor påverkas inte av transparensen i vätskan.

- 1 b flaska, 6 ml



Beställningsnr. 1986



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan (www.shofu.co.jp)
SHOFU INC. Singapore Branch 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684 (www.shofu.com.sg)
SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China (www.shofu.com.cn)
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA (www.shofu.com)
SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK (www.shofu.co.uk)
SHOFU DENTAL GmbH   Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)
SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.
© Copyright 2001 SHOFU INC. All rights reserved.