

OneGloss M

MOUNTED

Twee-in-een-polijster
voor composiet en glazuur



Afwerken en polijsten met

De twee-in-een-polijstrubbers met aluminiumoxide zijn het ideale instrument voor de afwerking van alle soorten composiet-restauraties. U hoeft alleen maar de contactdruk aan te passen en dat gaat heel snel en gemakkelijk, vanaf de eerste bewerkingsstap tot aan het polijsten.

- De polijstrubbers OneGloss M zijn gemonteerd op een roestvrijstalen mandrel voor gebruik met een hoekstuk en kunnen gesteriliseerd worden
- Afwerken met hoge drukkracht (ca. 1,0 N)
- Polijsten met lichte drukkracht (ca. 0,3 N)
- Verwijderen van overtollig composiet of cement en polijsten van glazuur met matige tot lichte drukkracht
- Polijsten van glazuur na het verwijderen van brackets en tandsteen of voor het verwijderen van verkleuringen, met lichte drukkracht
- Aanbevolen toerentalbereik 3.000 min^{-1} tot 10.000 min^{-1} met intermitterende waternevel; het maximaal toegestane toerental van 15.000 min^{-1} mag niet worden overschreden



één instrument

Diverse vormen

Het assortiment bestaat uit vier vormen die optimaal op de te bewerken tandvlakken zijn afgestemd.


Cup

voor knobbels,
incisaal en occlusaal




Midi-Point

voor labiaal, linguaal,
buccaal en occlusaal

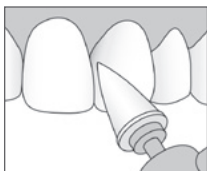



Mini-Point

voor fissuren en
cervicaal

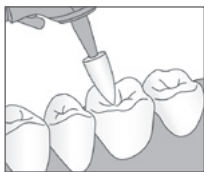

IC

voor labiaal, linguaal,
buccaal en approximaal

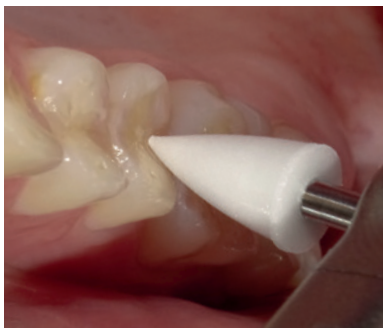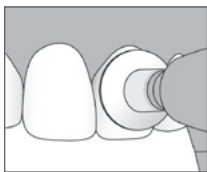

Bestelinformatie

OneGloss M

met mandrel voor gebruik met hoekstuk, 12 st. per verpakking



Vorm: Mini-Point

Bestelnr. 0186



Vorm: Cup

Bestelnr. 0187



Vorm: Midi-Point

Bestelnr. 0188



Vorm: IC

Bestelnr. 0189



Manufacturer
SHOFU INC.

[EC REP] SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany

11 Kamitakamatsu-cho,
Fukuine, Higashiyama-ku,
Kyoto 605-0983, Japan

www.shofu.de