

SHOFU
Universal
— Primer —

Adesione sicura senza ritenzioni



SHOFU Universal Primer

Semplice, efficace ed universale

SHOFU Universal Primer garantisce un'adesione eccellente tra materiali resinosi, tutte le leghe metalliche e anche ossido di zirconio e allumina.

Questo primer, in combinazione con SHOFU Universal Pre-Opaque, assicura un'adesione duratura anche in ambienti umidi e consente di fare a meno di ritenzioni meccaniche per le strutture in metallo.

Indicazioni

- tra opachi fotopolimerizzabili e strutture
- nella realizzazione e riparazione di restauri rivestiti in resina
- nella riparazione intraorale ed extraorale di restauri metalloceramici
- tra base in metallo e resina della protesi
- tra resina ed apparecchi ortodontici



SHOFU Universal Primer




SHOFU Universal Pre-Opaque

Vantaggi

- Lavorazione veloce e semplice senza trattamenti aggiuntivi
- Incolore, nessuna zona grigia nell'area d'adesione
- Adesione stabile, anche senza sfere di ritenzione
- Per tutte le leghe dentali e strutture a base di zirconio
- Uso intraorale ed extraorale

L'ampio spettro di indicazioni e la lavorazione veloce e semplice, senza la necessità di ulteriori accessori o di trattamenti termici, fanno di SHOFU Universal Primer, successore del consolidato SHOFU MZ Primer Plus, la soluzione universale nelle cementazioni per strutture in metallo e ossido di zirconio realizzate con CAD/CAM.

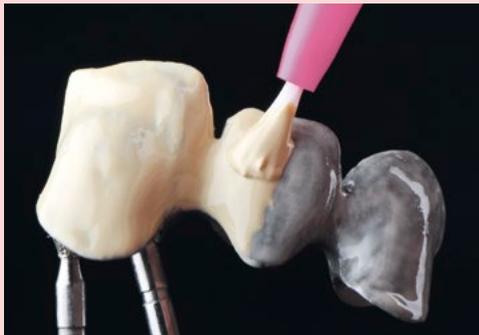

SHOFU Universal Opaque

SHOFU Universal Pre-Opaque forma con SHOFU Universal Primer un sistema adesivo perfetto, estremamente resistente agli effetti dell'idrolisi e alle sollecitazioni termiche.

La successiva resa cromatica nel colore del dente desiderato si ottiene con gli opachi SHOFU Universal Opaque, disponibili in 31 colori.

Informazioni per gli ordini



SHOFU Universal Primer

Contenuto: 5 ml, PN Y0060

Prodotti correlati



SHOFU Universal Pre-Opaque

Universal Pre-Opaque è molto fluido e garantisce un legame stabile con la lega e gli opachi in pasta Universal Opaque.

Contenuto: 2 ml, PN 2111



SHOFU Universal Opaque

Opaco in pasta fotopolimerizzabile, pronto all'uso. Oltre ai 16 colori standard, il sistema di opachi viene completato con colori Bleaching, NCC e per effetti.



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
EC REP SHOFU DENTAL GmbH An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany, www.shofu.de

SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders.
SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.