

Super-Snap **X-TREME** FINISHING & POLISHING & Super-Snap



Hochwertige Finier- und Polierscheiben

Super-Snap X-Treme

Modernste 3-D-Technologie


Die Super-Snap X-Treme-Polierscheiben – eine Weiterentwicklung der etablierten grünen und roten Super-Snap-Scheiben – zeichnen sich durch längere Standzeiten und eine erhöhte Festigkeit aus, ihre bekannte Flexibilität im interproximalen Bereich bleibt jedoch erhalten.



Politur mit Super-Snap X-Treme Standard-Disk




Hochglanzpolitur mit Super-Snap X-Treme Mini-Disk

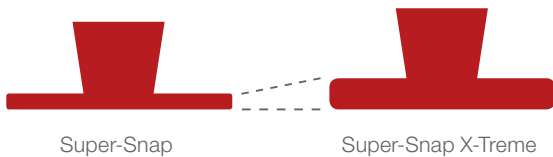

Die beidseitig beschichteten Super-Snap X-Treme-Scheiben (erhältlich in Mini- und Standard-Durchmesser) sind dicker als die Super-Snap-Scheiben, wodurch ein höherer Anpressdruck bei der Politur ermöglicht wird. Die zusätzliche Stärke erzeugt eine größere Taktilität und führt zu einer optimierten Hochglanzpolitur.

- Weiterentwicklung der ursprünglichen grünen und roten Super-Snap-Scheiben
- Extra dick für mehr Stabilität, Taktilität und Widerstandsfähigkeit bei weiterhin hoher Flexibilität im Approximallbereich
- 3-D-Beschichtung verhindert das Zusetzen der Oberfläche
- Vereinfachtes 2-Schritt-Poliervorgehen
- Sehr hoher Glanzgrad mit niedriger Oberflächenrauigkeit erzielbar
- Beidseitig mit Aluminiumoxid beschichtet
- 2 Größen: Standard (12 mm) und Mini (8 mm)


Super-Snap X-Treme Oberflächenkörnung, 400-fache Vergrößerung

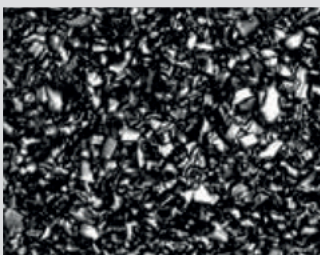



Grüne Disk - fein
Polieren



Rote Disk - extrafein
Hochglanz

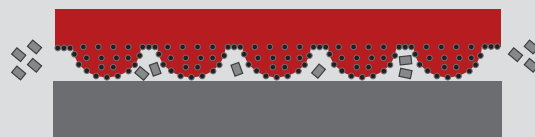


Die rote 3-D-Aluminiumoxid-Beschichtung von Super-Snap X-Treme bietet Freiraum für den Transport des Abriebs nach außen während des Polierens. Dadurch werden Sekundärkratzer und das Zusetzen der Oberfläche vermieden.

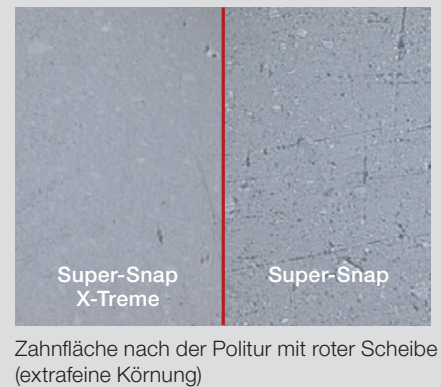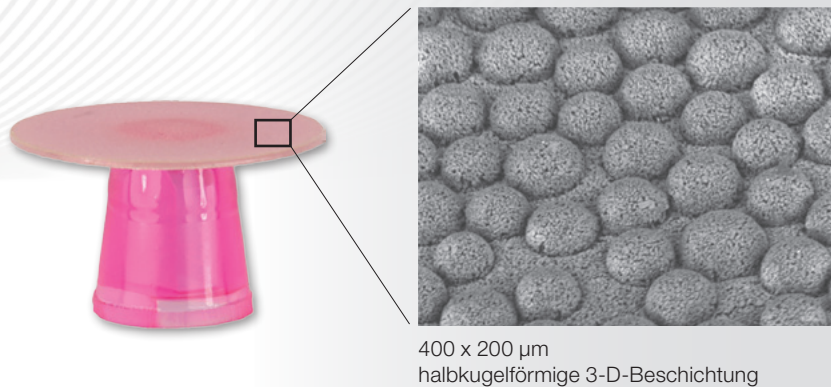

Auf Hochglanz polieren – ohne Zusetzen der Oberfläche

Die roten Super-Snap X-Treme-Scheiben stellen mit ihrer innovativen 3-D-Beschichtung eine Besonderheit dar. Zwischen gleichmäßig verteilten Halbkugeln aus Aluminiumoxid-Partikeln sammelt sich der Abrieb und wird entfernt. Dies verhindert ein Zusetzen der Scheibe und Sekundärkratzer durch Polierstaub. Das Resultat ist ein natürlicher Glanz.

Glanzgrad (Gs)

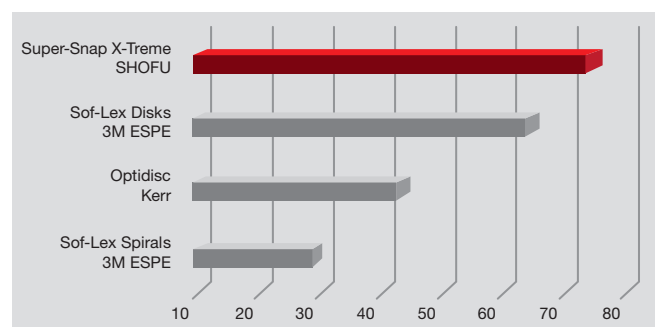

Quelle: R&D (Forschung & Entwicklung) SHOFU INC., Japan
Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.

Super-Snap


Schritt für Schritt zu besten Kompositfüllungen

Mit Super-Snap, dem 4-Schritt-Scheibensystem, können Sie alle mikrogefüllten und Nanohybrid-Komposite einfach, schnell und sicher konturieren, finieren und polieren.


Die Scheiben sind mit Siliziumkarbid bzw. Aluminiumoxid beschichtet. Da sie kein metallisches Zentrum haben, werden versehentliche Beschädigungen und Verfärbungen von Komposit und Zahnschmelz verhindert. Sie sind stirnseitig, schaftseitig und beidseitig beschichtet und in den Größen Standard (ø 12 mm) und Mini (ø 8 mm) lieferbar.

- Farbcodiert nach Körnung: grob (schwarz), mittel (violett), fein (grün) und extrafein (rot)
- Hochflexibel, ideal für den Approximalbereich
- Kein Metallzentrum, verhindert das Risiko von Beschädigungen
- Elastische Träger zum einfachen Aufsetzen auf das Mandrell


Super-Snap Oberflächenkörnung, 400-fache Vergrößerung

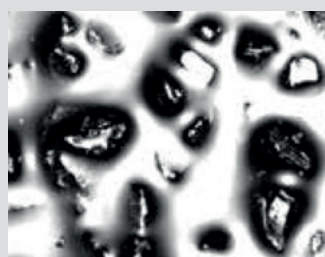


Schwarze Disk - grob
Konturieren

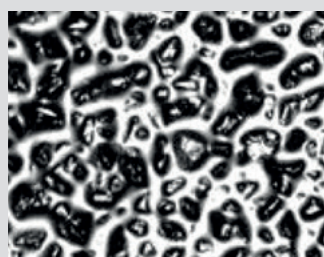

Violette Disk - mittel
Finieren

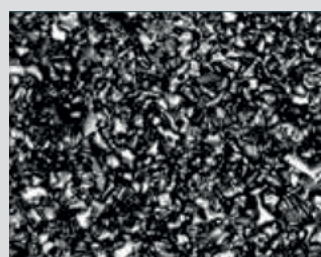

Grüne Disk - fein
Polieren

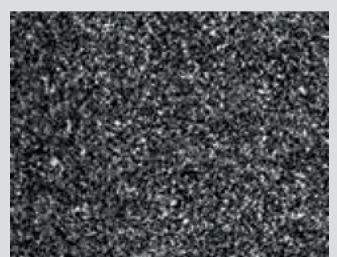

Rote Disk - extrafein
Hochglanz

Bestellinformationen

Super-Snap X-Treme

	Polieren		Hochglanz	
				
Super-Snap X-Treme				
50 St. / Pckg.	L511	L531	L512	L532
Farbe / Körnung	Grün / fein		Rot / extrafein	



Super-Snap X-Treme

Disk Kit

je 80 Scheiben Super-Snap / Super-Snap X-Treme
2 Dura-White Steine (CN1/FL2)
je 2 CompoSite / CompoSite Fine Midispitzen
4 W-Mandrells, Stahl
REF N0511



Super-Snap X-Treme

Standard Disk Kit

je 50 Standard-Scheiben in grün und rot
REF 0506

Mini-Disk Kit

je 50 Mini-Scheiben in grün und rot
REF 0507

Super-Snap

	Konturieren		Finieren				Polieren		Hochglanz	
										
Super-Snap										
50 St. / Pckg.	L506	L507	L508	L509	L528	L522	L501	L519	L502	L521
Farbe / Körnung	Schwarz / grob		Violett / mittel				Grün / fein		Rot / extrafein	



Super-Snap Disk Kit

100 Standard-Scheiben, 80 Mini-Scheiben
2 Dura-White Steine (CN1 und FL2)
1 CompoSite Fine Midispitze
4 W-Mandrells, Stahl
REF N0510

Super-Snap Mini-Kit

32 Standard-Scheiben, 16 Mini-Scheiben
1 CompoSite Fine Midispitze
1 W-Mandrell, Stahl
REF 0505

Mandrells

6 FG-Mandrells (Turbine), Stahl
REF 0438

6 W-Mandrells (Winkelstück), Stahl
REF 0439

100 W-Mandrells, Kunststoff
REF 0440



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
SHOFU DENTAL GmbH An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany, www.shofu.de

SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.