

Super-Snap **X-TREME** FINISHING & POLISHING & Super-Snap



Dischi di rifinitura e lucidatura di alta qualità


Super-Snap X-Treme

Tecnologia 3D di ultima generazione


I dischi di lucidatura Super-Snap X-Treme, un'evoluzione dei dischi verdi e rossi Super-Snap già ben affermati, si contraddistinguono per una durata più lunga e una maggiore resistenza, mantenendo comunque la ben nota flessibilità nelle aree interprossimali.



Lucidatura con il disco standard Super-Snap X-Treme

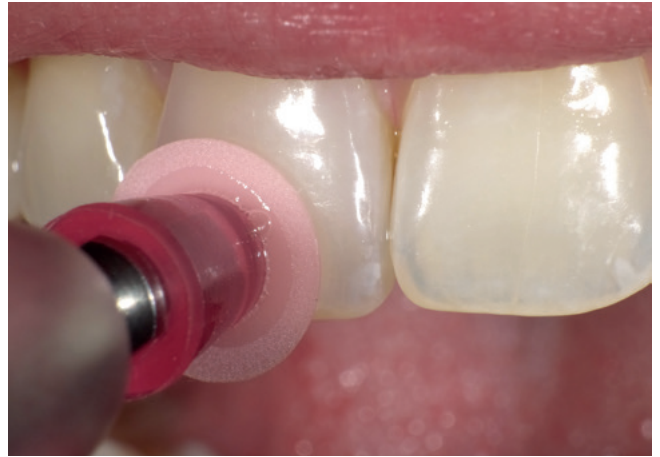


Lucidatura a specchio con il disco mini Super-Snap X-Treme

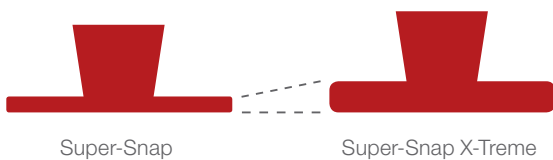

I dischi Super-Snap X-Treme rivestiti su entrambi i lati (disponibili con diametro standard e mini) sono più spessi dei dischi Super-Snap e permettono così di esercitare una maggiore pressione d'utilizzo durante la lucidatura. Lo spessore aggiuntivo permette all'operatore di avere una maggiore sensibilità allo strumento che si traduce in una migliore lucidatura a specchio.

- L'evoluzione degli originali dischi verdi e rossi Super-Snap
- Più spessi per aumentare stabilità, sensibilità dell'operatore e resistenza mantenendo sempre un'elevata flessibilità nelle aree approssimali
- Il rivestimento 3D impedisce l'accumulo di materiale sulla superficie
- Processo di lucidatura semplificato in 2 fasi
- Possibilità di ottenere un elevato grado di lucentezza con una bassa rugosità superficiale
- Rivestimento su entrambi i lati con ossido di alluminio
- 2 misure: standard (12 mm) e mini (8 mm)


Granulometria superficiale di Super-Snap X-Treme, ingrandimento x400

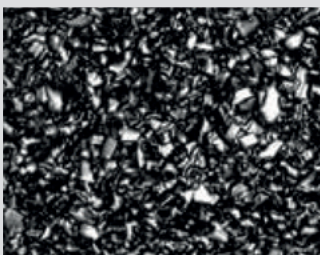



Disco verde: grana fine
Lucidatura




Disco rosso: grana extra-fine
Lucidatura a specchio

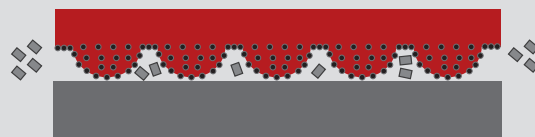

Il rivestimento rosso 3D in ossido di alluminio di Super-Snap X-Treme crea lo spazio per spostare verso l'esterno i residui di materiale asportato durante la lucidatura. In questo modo si evitano abrasioni secondarie e accumuli di materiale sulla superficie.

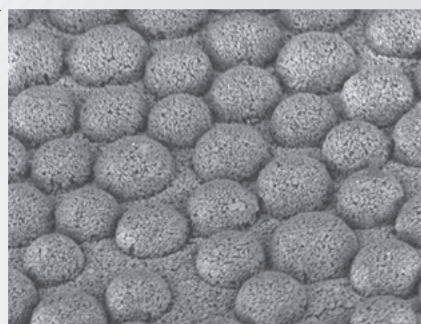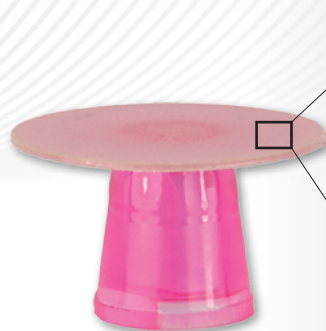

400 x 200 µm
Rivestimento 3D semisferico

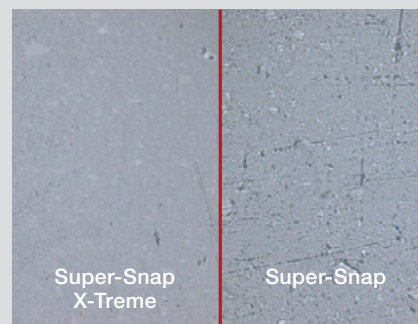


Super-Snap X-Treme
Superficie del dente dopo la lucidatura con il disco rosso (grana extra-fine)

Lucidare a specchio senza eccedenze di materiale sulla superficie

I dischi rossi Super-Snap X-Treme sono eccezionali grazie al loro innovativo rivestimento 3D. Il materiale asportato si concentra tra le semisfere distribuite uniformemente, composte da particelle di ossido di alluminio, e viene rimosso. In questo modo si evitano accumuli di materiale sul disco e abrasioni secondarie causate dalla polvere di lucidatura. Ne risulta una lucentezza naturale.

Grado di lucentezza

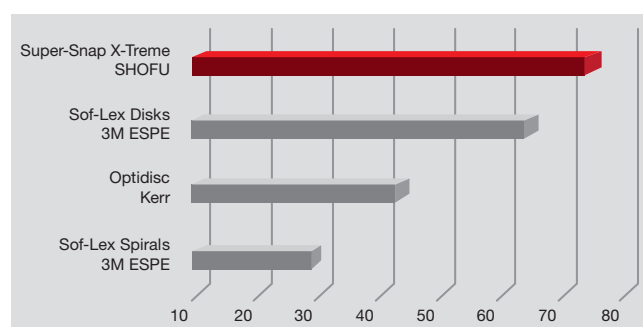

Fonte: R&D (Ricerca e Sviluppo), SHOFU INC., Giappone
Tutti i marchi sono proprietà dei relativi produttori.

Super-Snap

Step-by-step per ottenere perfetti restauri in composito


Con Super-Snap, il sistema di dischi in 4 passaggi, è possibile sgrossare, rifinire e lucidare tutti i compositi microriempiti e nanoibridi in modo semplice, veloce e sicuro. I dischi sono rivestiti con carburo di silicio o ossido di alluminio. Non avendo la parte centrale in metallo si evitano danneggiamenti involontari e decolorazioni del composito e dello smalto. I dischi sono rivestiti sul lato superiore, sul lato verso il gambo o su entrambi i lati e sono disponibili nelle misure standard (ø 12 mm) e mini (ø 8 mm).

- Codificazione cromatica in base alla granulometria: grana grossa (nero), grana media (viola), grana fine (verde) e extra-fine (rosso)
- Estremamente flessibili, ideali per le aree approssimali
- La parte centrale non è in metallo: si elimina il rischio di danneggiamenti
- Supporto elastico del gambo per un facile posizionamento sul mandrino


Granulometria superficiale di Super-Snap, ingrandimento x400




Disco nero: grana grossa
Sgrossatura

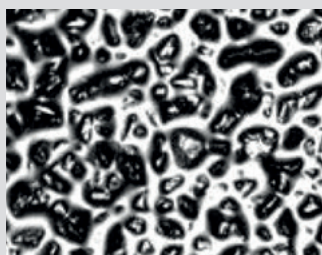

Disco viola: grana media
Rifinitura

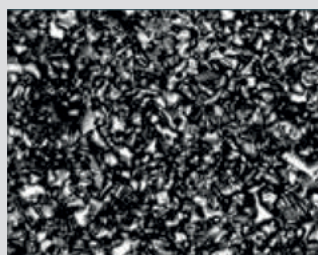

Disco verde: grana fine
Lucidatura

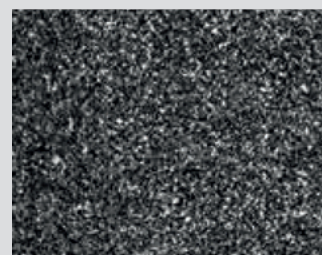

Disco rosso: grana extra-fine
Lucidatura a specchio

Informazioni per gli ordini

Super-Snap X-Treme

	Lucidatura		Lucidatura a specchio	
Super-Snap X-Treme				
50 pz. / conf.	L511	L531	L512	L532
Colore / Granulometria	Verde / grana fine		Rosso / grana extra-fine	



Super-Snap X-Treme

Disk Kit

80 dischi per tipo Super-Snap/
Super-Snap X-Treme
2 punte abrasive Dura-White
(CN1 e FL2)
2 CompoSite / CompoSite
Fine Midpoint per tipo
4 mandrini CA, acciaio

REF N0511



Super-Snap X-Treme

Standard Disk Kit

50 dischi standard per
colore, verde e rosso

REF 0506

Mini-Disk Kit

50 dischi mini per
colore, verde e rosso

REF 0507

Super-Snap

	Sgrossatura		Rifinitura				Lucidatura		Lucidatura a specchio	
Super-Snap										
50 pz. / conf.	L506	L507	L508	L509	L528	L522	L501	L519	L502	L521
Colore / Granulometria	Nero / grana grossa		Viola / grana media				Verde / grana fine		Rosso / grana extra-fine	



Super-Snap Disk Kit

100 dischi standard, 80 dischi mini
2 punte abrasive Dura-White (CN1 e FL2)
1 CompoSite Fine Midpoint
4 mandrini CA, acciaio

REF N0510

Super-Snap Mini-Kit

32 dischi standard, 16 dischi mini
1 CompoSite Fine Midpoint
1 mandrino CA, acciaio

REF 0505

Mandrini

6 mandrini FG (turbina), acciaio

REF 0438

6 mandrini CA (contrangolo), acciaio

REF 0439

100 mandrini CA, plastica

REF 0440



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
SHOFU DENTAL GmbH An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany, www.shofu.de

SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.