


Veracia & Veracia SA

Zähne, die zueinander finden!

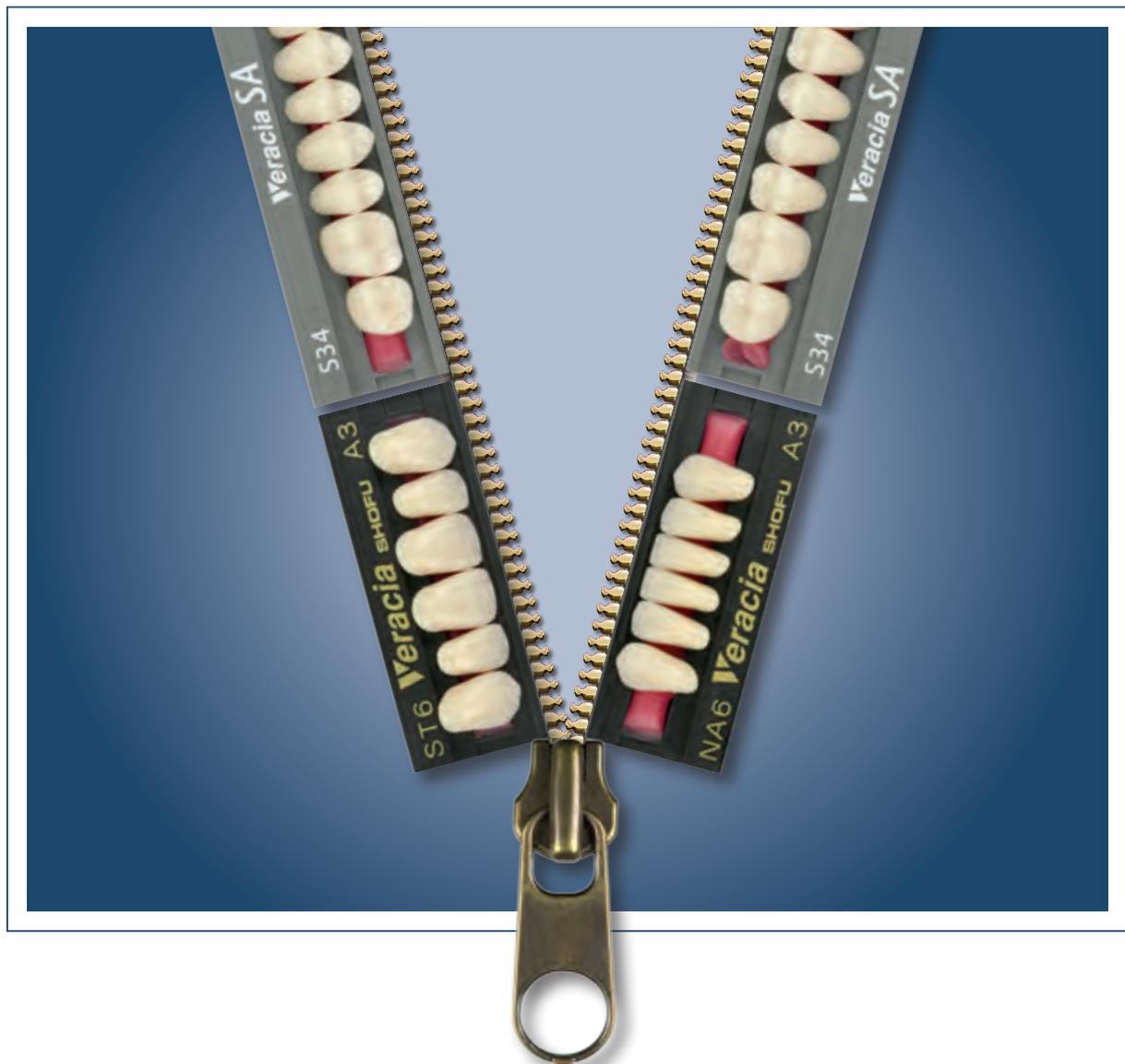



Veracia

Front- und Seitenzähne nach den Vorgaben der Natur

Die Formen der vollanatomischen Veracia Anterior und Posterior Kompositzähne sind mit modernster CAD/CAM-Technologie nach den anatomischen Parametern natürlicher Zähne gefertigt. Sie beeindrucken durch ihre außergewöhnliche Ästhetik und lebendig gestaltete Oberflächenstruktur. Dabei sind sie multifunktional und uneingeschränkt für alle Aufstellkonzepte der Total- und Teilprothetik einsetzbar.



Die konvexe Gestaltung der Labialflächen unterstützt die Lippenausformung und das Erscheinungsbild der Prothese. Ausgeprägte palatinale Leisten und Inzisalkanten sichern die Führung bei den Funktionsbewegungen und erhalten die phonetischen Fähigkeiten der Patienten.

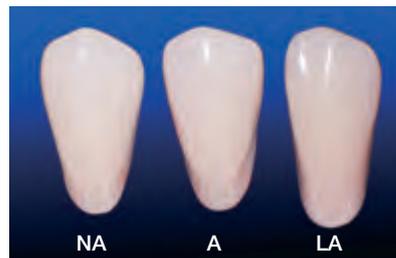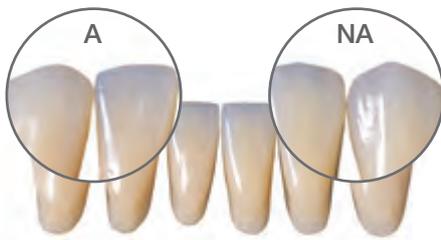

Neben drei verschiedenen Größen sind zwei Abrasionsformen (NA und A) erhältlich.

Die Formen „NA“ entsprechen nicht-abradierten Zähnen. „A“ und „LA“-Formen sind leicht abradert.

Multifunktionell In Form und Anwendung

Korrespondierend zu den Veracia Frontzähnen zeigen die Seitenzähne bei allen drei Größen (S, M, L) eine harmonische Übereinstimmung in Funktion und Morphologie. Zur Optimierung der Kaufunktionalität bieten diese Seitenzähne ein ausgewogenes Verhältnis der Okklusionsfläche zur anatomischen Zahnform.



Das okklusale Muster weist eine Freiheit in der zentrischen Position auf, welche durch Vorstopps zentriert wird. So ist eine kontrollierte und gelenkschonende Bewegung während des Kauvorgangs gewährleistet.

Indikationen

- Totalprothetik
- Implantatkonstruktionen
- Teleskop- und Konuskonstruktionen
- Geschiebearbeiten
- Modellgussprothesen



Aufstellarten

- Zahn-zu-Zahn-Okklusion
- Zahn-zu-zwei-Zahn-Okklusion
- Balancierte und lingualisierte Okklusion
- Front-Eckzahn geführte Okklusion
- Sequenzielle Führung

Veracia SA

Alters- und funktionsgerechte Zahnformen für eine komfortable Prothetik


Bei den semianatomischen Veracia SA Front- und Seitenzähnen wurde die Abnutzung verbleibender natürlicher Zähne berücksichtigt. Die anatomischen Charakteristika der Veracia Zähne hat man belassen und an exakt bestimmten Sektoren mit Abrasionsfacetten versehen. Das Ergebnis sind eine deutlich bessere Kauleistung, ein angenehmer Tragekomfort und wesentlich weniger Stress für das Kiefergelenk.

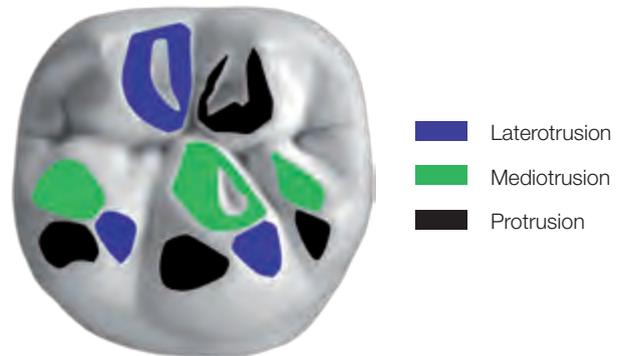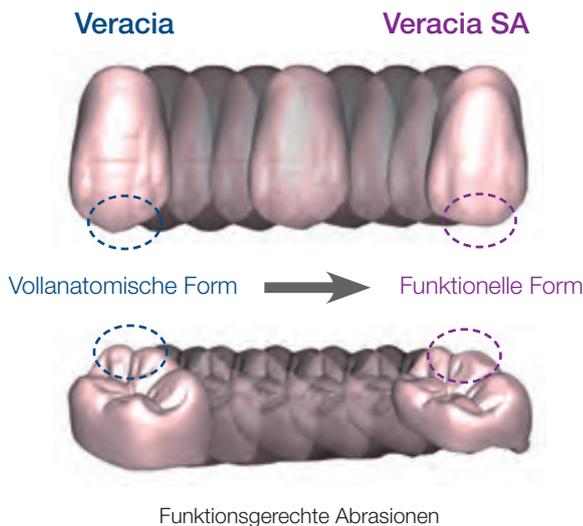

Die funktionellen Abrasionsfacetten sind ideal für die balancierte oder lingualisierte Okklusion, sodass nach der Aufstellung kaum Einschleifkorrekturen erforderlich sind.

Beste physikalische Eigenschaften durch MF-H Komposit-Technologie

Die Veracia und Veracia SA Zähne bestehen aus mikrogefülltem Hybrid-Komposit (MF-H Micro Filled Hybrid Composite), verstärkt mit beschichteten Glasfüllern. Diese homogene Struktur erreicht beste physikalische Eigenschaften und eine hervorragende Abrasions- und Mundbeständigkeit.

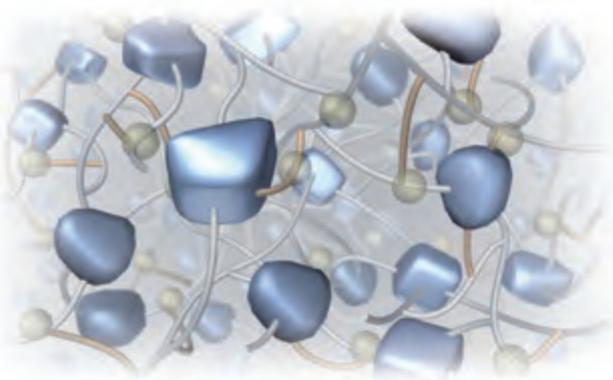

Deshalb Veracia / Veracia SA

- Alters- und funktionsgerechte Zahnformen
- Keine Bindung an ein Okklusionskonzept
- Zeitsparend bei der Aufstellung
- Balancierte Okklusion, allein durch die Aufstellung
- Hohe Anwendersicherheit
- Effiziente Herstellung im Dentallabor
- Gleichbleibende Qualität der hergestellten Prothesen

Zähne, die zueinander finden

Veracia und Veracia SA Zähne unterstützen Ihre Effizienz bei der Herstellung prothetischer Arbeiten. Durch die Gleichschaltung der Systeme können Sie auch entsprechend der prothetischen Anforderung die vollanatomischen Frontzähne mit den semianatomischen Seitenzähnen kombinieren.



Veracia Anterior

OBERKIEFER



Quadratisch

S4	42,8 10,4 8,0	
S5	45,5 11,1 8,5	
S6	48,2 11,7 9,0	



Rechteckig

ST4	42,8 10,7 8,0	
ST5	45,5 11,4 8,5	
ST6	48,2 12,0 9,0	



Lang-quadratisch

LS5	45,5 11,9 8,5	
LS6	48,2 12,5 9,0	



Lang-rechteckig

LT5	45,5 12,1 8,5	
LT6	48,2 12,7 9,0	



Oval

O4	42,8 9,9 8,0	
O5	45,5 10,5 8,5	
O6	48,2 11,1 9,0	



Lang-oval

L05	45,5 12,0 8,5	
L06	48,2 12,8 9,0	

Veracia Posterior

UNTERKIEFER



Standard

NA4	33,2 9,6 4,8	
NA5	35,3 10,2 5,0	
NA6	37,3 10,8 5,2	
A4	33,2 9,3 4,8	
A5	35,3 9,8 5,0	
A6	37,3 10,4 5,2	





Lang

LA5	35,3 10,9 5,0	
LA6	37,3 11,5 5,2	

OBERKIEFER / UNTERKIEFER



S	30,0 10,1	
30	32,5 10,1	
M	32,0 10,8	
32	34,5 10,8	
L	34,0 11,4	
34	36,5 11,4	

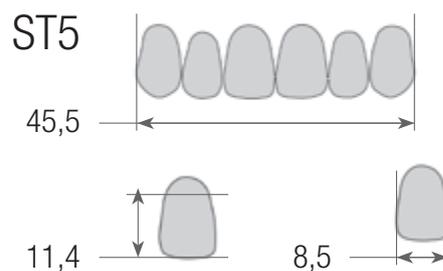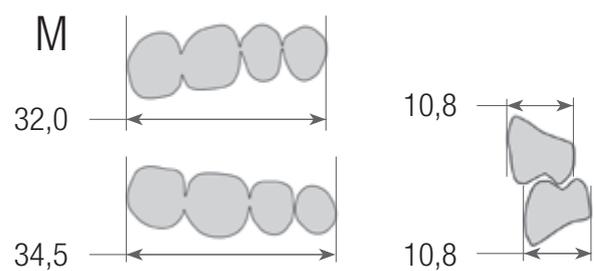

Alle Maße in Millimeter

Veracia SA Anterior

OBERKIEFER / UNTERKIEFER



Quadratisch

S4	43,0 9,2 7,9	
S5	45,7 9,8 8,4	
S6	48,5 10,4 8,9	
S7	51,2 11,0 9,4	



Rechteckig

ST4	43,5 9,6 8,0	
ST5	46,3 10,2 8,5	
ST6	49,0 10,8 9,0	
ST7	51,8 11,4 9,5	




Oval

O4	43,4 10,4 8,0	
O5	46,2 11,0 8,5	
O6	49,0 11,7 9,0	
O7	51,8 12,4 9,5	



Mehr abradiert

MA4	32,5 9,4 4,7	
MA5	34,6 10,1 5,0	
MA6	36,7 10,7 5,3	
MA7	38,8 11,3 5,6	
MA8	40,9 11,9 5,9	

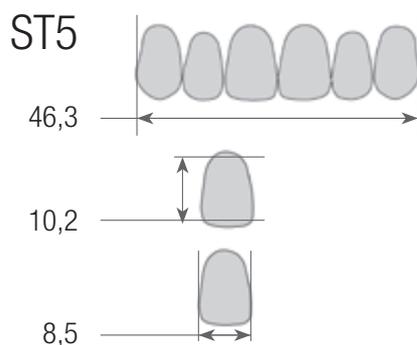


Die Front- und Seitenzähne sind in den VITA* Classical Farben A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 und in der SHOFU Whitening-Farbe W1 erhältlich.

Veracia SA Posterior

OBERKIEFER / UNTERKIEFER



S28	28,0	
	8,7	
S30	30,0	
	9,4	
S32	32,0	
	10,0	
S34	34,0	
	10,6	
S36	36,0	
	11,2	
S28	30,0	
	8,9	
S30	32,0	
	9,5	
S32	34,0	
	9,9	
S34	36,0	
	10,7	
S36	38,0	
	11,3	

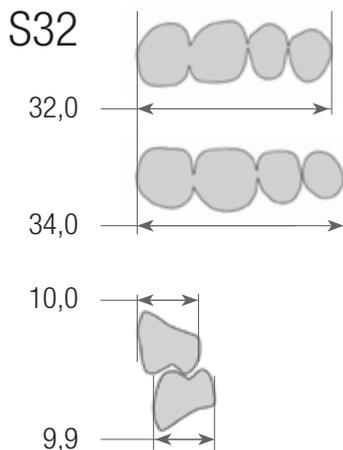

Alle Maße in Millimeter

Frontzahnempfehlungen OK/UK

Überbiss Vertikal		OK	S4	S5	S6	S7		
			ST4	ST5	ST6	ST7		
			O4	O5	O6	O7		
Überbiss Horizontal		UK	MA4	MA5	MA6	MA7		
		Überbiss Vertikal		OK	S4	S5	S6	S7
					ST4	ST5	ST6	ST7
	O4			O5	O6	O7		
Überbiss Horizontal		UK	MA5	MA6	MA7	MA8		

Veracia & Veracia SA

Kombinationsempfehlungen

	Veracia Anterior				Veracia Posterior	Veracia SA Posterior
	Obere	Untere			Obere / Untere	Obere / Untere
Quadratisch	S4	NA4	A4		S	30
	S5	NA5	A5	LA5	S / M	30 / 32
	LS5	NA5	A5	LA5	S / M	30 / 32
	S6	NA6	A6	LA6	M / L	32 / 34 / 36
	LS6	LS6	A6	LA6	M / L	32 / 34 / 36
Rechteckig	ST4	NA4	A4		S	30
	ST5	NA5	A5	LA5	S / M	30 / 32
	LT5	NA5	A5	LA5	S / M	30 / 32
	ST6	NA6	A6	LA6	M / L	32 / 34 / 36
	LT6	NA6	A6	LA6	M / L	32 / 34 / 36
Oval	O4	NA4	A4		S	30
	O5	NA5	A5	LA5	S / M	30 / 32
	LO5	NA5	A5	LA5	S / M	30 / 32
	O6	NA6	A6	LA5	M / L	32 / 34 / 36
	LO6	NA6	A6	LA6	M / L	32 / 34 / 36

Bei den obigen Tabellen handelt es sich um Kombinationsempfehlungen. Selbstverständlich können Sie die vollanatomischen Veracia Anterior-Zähne auch individuell mit den semianatomischen Veracia SA Posterior-Zähnen, bezogen auf den Patientenfall, miteinander kombinieren.

* VITA ist ein eingetragenes Warenzeichen der VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Deutschland.

