


Veracia & Veracia SA

Denti che si integrano tra loro perfettamente!


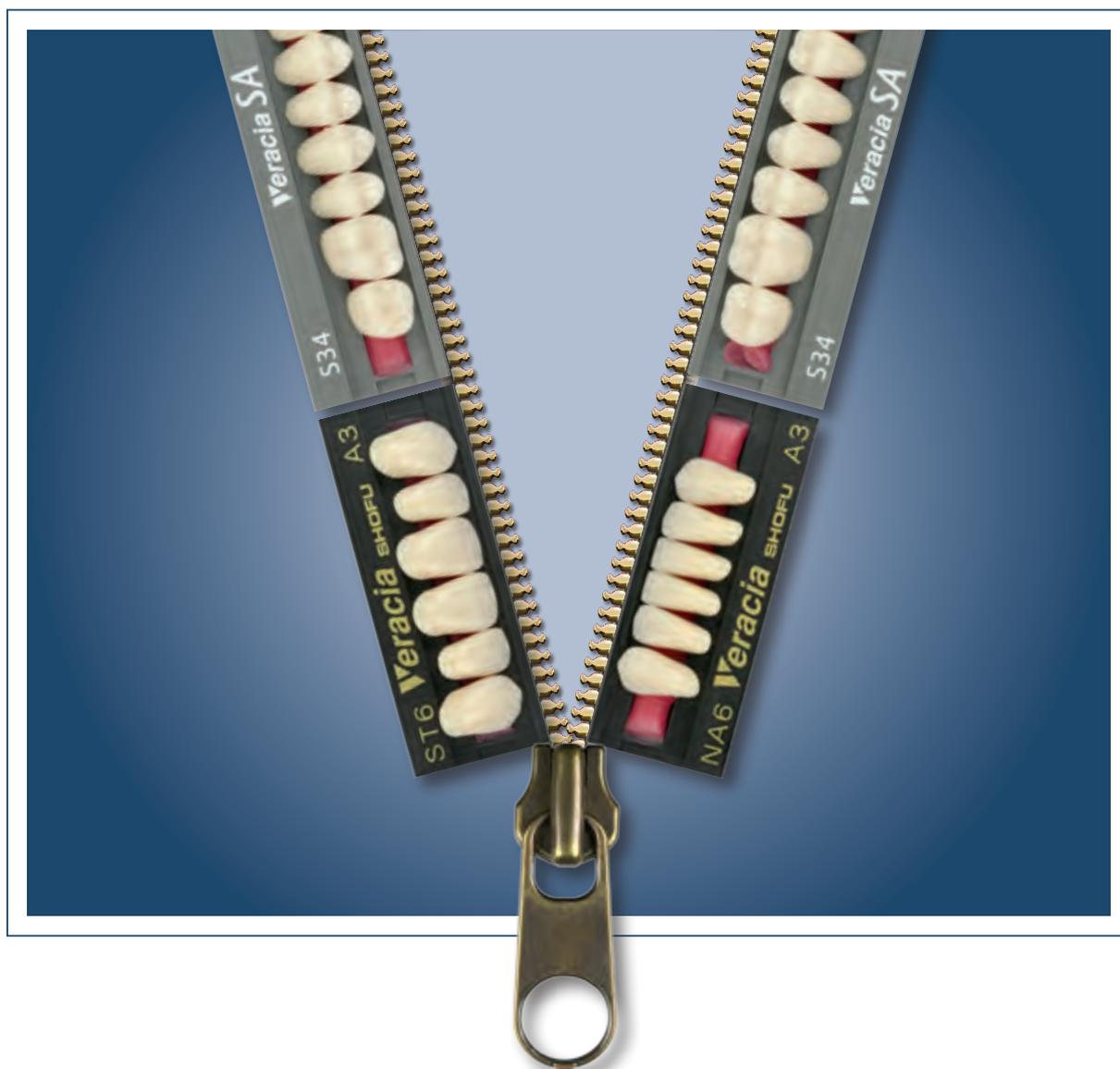


Denti anteriori e posteriori secondo gli standard della natura

Le forme dei denti in composito completamente anatomici Veracia Anterior e Posterior sono realizzate con la tecnologia CAD/CAM di ultima generazione secondo i parametri anatomici dei denti naturali. Presentano un'estetica straordinaria e una tessitura superficiale naturale. Hanno inoltre un utilizzo multifunzionale e illimitato per tutti i concetti di montaggio di protesi totale e parziale.



La forma convessa delle superfici labiali migliora il contorno delle labbra e l'aspetto della protesi. Le creste palatali e i bordi incisali ben definiti assicurano la guida durante i movimenti funzionali e preservano le capacità fonetiche dei pazienti.

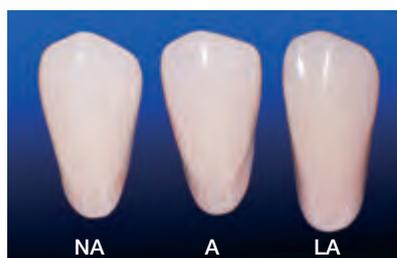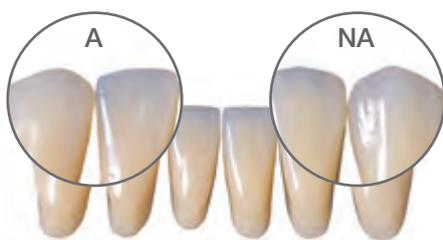

Oltre a tre diverse misure, sono disponibili due forme di abrasione (NA e A).

Le forme "NA" corrispondono a denti non abrasati. Le forme "A" e "LA" sono leggermente abrasate.

Multifunzionali per forma e utilizzo

Analogamente ai denti anteriori Veracia, i denti posteriori mostrano un'armoniosa corrispondenza funzionale e morfologica in tutte e tre le misure (S, M, L). Per ottimizzare la funzionalità masticatoria, questi denti posteriori offrono un rapporto equilibrato tra la superficie oclusale e la forma anatomica del dente.



Il modello oclusale ha un certo grado di libertà nella posizione di centrica, che viene centrata con stop integrati. Ciò garantisce un movimento controllato e in grado di proteggere le articolazioni durante la masticazione.

Indicazioni

- Protesi totale
- Ricostruzioni su impianti
- Restauri con corone telescopiche e coniche
- Lavori con attacchi
- Scheletrati


Tipi di montaggio

- Occlusione dente a dente
- Occlusione un dente a due denti
- Occlusione bilanciata e lingualizzata
- Occlusione con guida incisale-canina
- Guida sequenziale

Veracia SA

Forme dei denti adatte all'età e alla funzione per una protesi confortevole


Per i denti anteriori e posteriori semi-anatomici Veracia SA si è presa in considerazione l'usura dei denti naturali. Sono state mantenute le caratteristiche anatomiche dei denti Veracia e si sono aggiunte faccette d'abrasione in settori ben definiti. Il risultato è un'efficienza masticatoria nettamente migliore, un piacevole comfort di utilizzo e una sollecitazione dell'articolazione temporomandibolare molto più bassa.

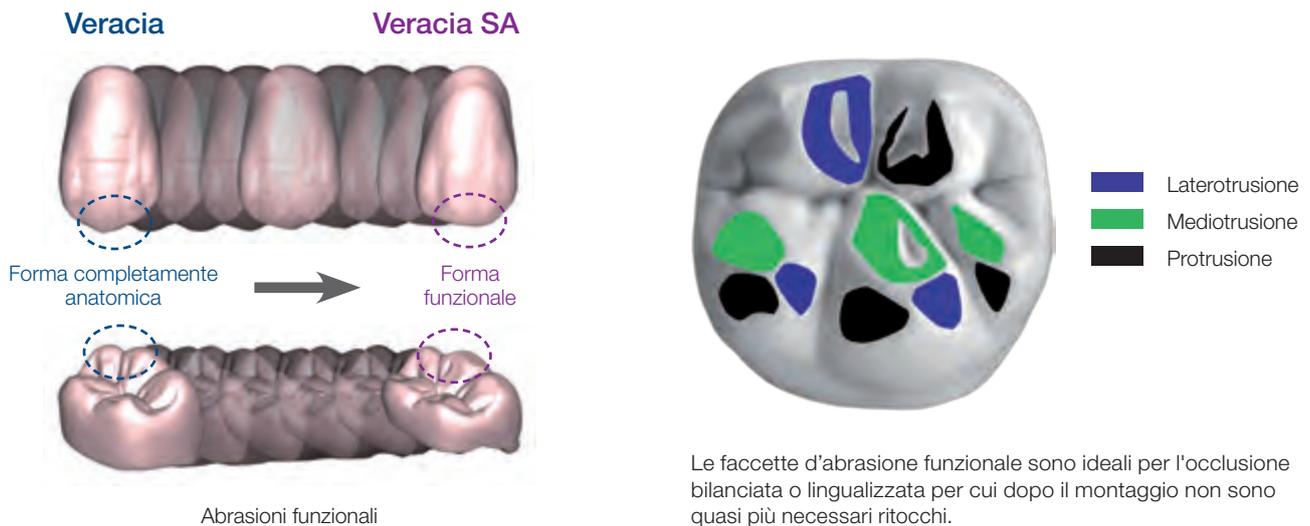

Le faccette d'abrasione funzionale sono ideali per l'occlusione bilanciata o lingualizzata per cui dopo il montaggio non sono quasi più necessari ritocchi.

Eccellenti caratteristiche fisiche con la tecnologia del composito MF-H

I denti Veracia e Veracia SA sono realizzati con un composito ibrido microriempito (MF-H Micro Filled Hybrid Composite), rinforzato con riempitivi vetrosi rivestiti. Questa struttura omogenea consente di ottenere le migliori proprietà fisiche e un'eccellente resistenza all'abrasione e biocompatibilità.

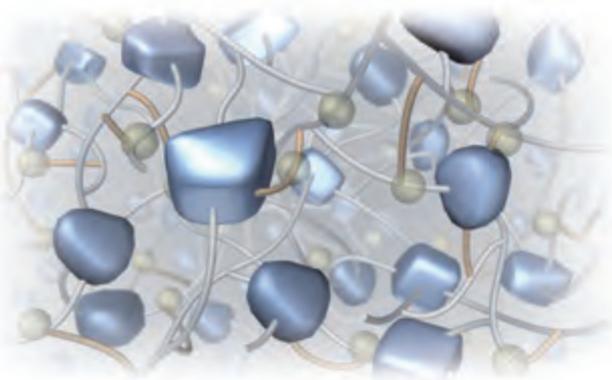

Ecco perché Veracia / Veracia SA

- Forme di denti in base all'età e alla funzione
- Nessun vincolo ad un determinato concetto d'occlusione
- Risparmio di tempo nel montaggio
- Occlusione bilanciata solo grazie al montaggio
- Elevata sicurezza d'utilizzo
- Realizzazione efficace nel laboratorio odontotecnico
- Qualità costante delle protesi realizzate

Denti che si integrano tra loro perfettamente

I denti Veracia e Veracia SA aumentano la vostra efficienza nella realizzazione di lavori protesici. Grazie alla perfetta integrazione dei due sistemi è possibile combinare i denti anteriori completamente anatomici con i denti posteriori semi-anatomici in base alle esigenze protesiche.



Veracia Anterior

MASCELLARE SUPERIORE



Quadrato

S4	42,8 10,4 8,0	
S5	45,5 11,1 8,5	
S6	48,2 11,7 9,0	



Rettangolare

ST4	42,8 10,7 8,0	
ST5	45,5 11,4 8,5	
ST6	48,2 12,0 9,0	



Quadrato lungo

LS5	45,5 11,9 8,5	
LS6	48,2 12,5 9,0	



Rettangolare lungo

LT5	45,5 12,1 8,5	
LT6	48,2 12,7 9,0	



Ovale

O4	42,8 9,9 8,0	
O5	45,5 10,5 8,5	
O6	48,2 11,1 9,0	



Ovale lungo

L05	45,5 12,0 8,5	
L06	48,2 12,8 9,0	

Veracia Posterior

MASCELLARE INFERIORE



Standard

NA4	33,2 9,6 4,8	
NA5	35,3 10,2 5,0	
NA6	37,3 10,8 5,2	
A4	33,2 9,3 4,8	
A5	35,3 9,8 5,0	
A6	37,3 10,4 5,2	





Lungo

LA5	35,3 10,9 5,0	
LA6	37,3 11,5 5,2	

MASCELLARE SUPERIORE / INFERIORE



S	30,0 10,1	
30	32,5 10,1	
M	32,0 10,8	
32	34,5 10,8	
L	34,0 11,4	
34	36,5 11,4	

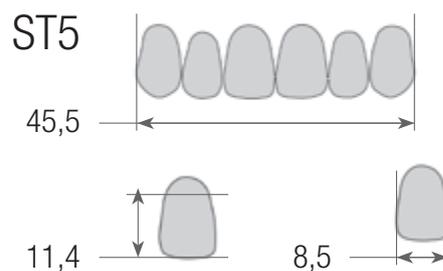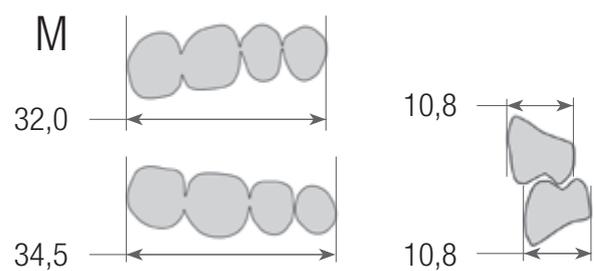

Tutte le misure sono espresse in mm

Veracia SA Anterior

MASCELLARE SUPERIORE / INFERIORE



Quadrato

S4	43,0 9,2 7,9	
S5	45,7 9,8 8,4	
S6	48,5 10,4 8,9	
S7	51,2 11,0 9,4	



Rettangolare

ST4	43,5 9,6 8,0	
ST5	46,3 10,2 8,5	
ST6	49,0 10,8 9,0	
ST7	51,8 11,4 9,5	




Ovale

O4	43,4 10,4 8,0	
O5	46,2 11,0 8,5	
O6	49,0 11,7 9,0	
O7	51,8 12,4 9,5	



Più abraso

MA4	32,5 9,4 4,7	
MA5	34,6 10,1 5,0	
MA6	36,7 10,7 5,3	
MA7	38,8 11,3 5,6	
MA8	40,9 11,9 5,9	

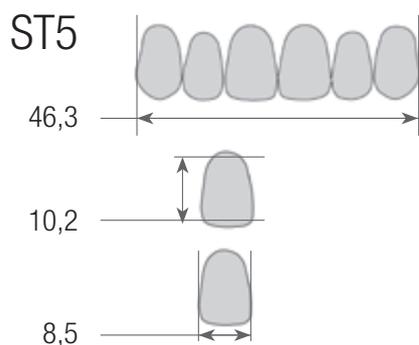


I denti anteriori e posteriori sono disponibili nei colori VITA* Classical A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 e nel colore SHOFU Whitening W1.

Veracia SA Posterior

MASCELLARE SUPERIORE / INFERIORE




S28	28,0	
	8,7	
S30	30,0	
	9,4	
S32	32,0	
	10,0	
S34	34,0	
	10,6	
S36	36,0	
	11,2	
S28	30,0	
	8,9	
S30	32,0	
	9,5	
S32	34,0	
	9,9	
S34	36,0	
	10,7	
S36	38,0	
	11,3	

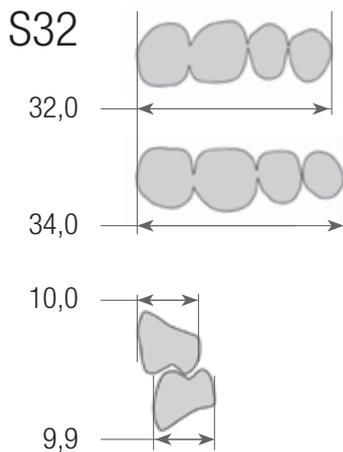

Tutte le misure sono espresse in mm

Consigli per denti anteriori SUP./INF.

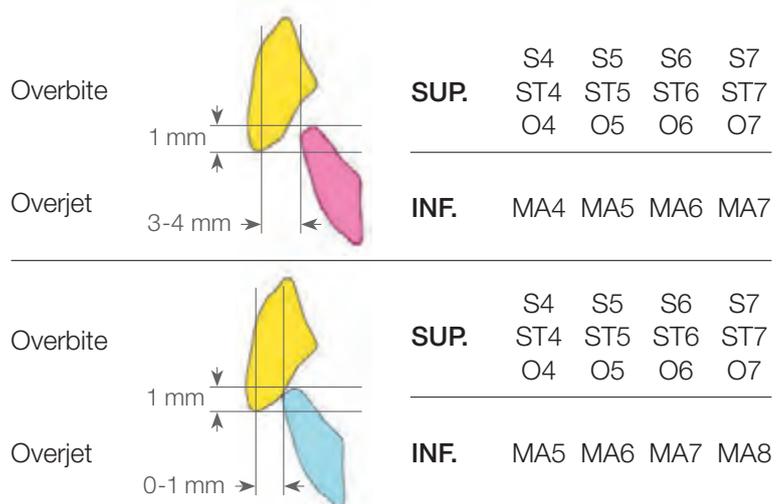

Veracia & Veracia SA

Consigli per le combinazioni

	Veracia Anterior				Veracia Posterior	Veracia SA Posterior
	SUP.	INF.			SUP./INF.	SUP./INF.
Quadrato	S4	NA4	A4		S	30
	S5	NA5	A5	LA5	S/M	30/32
	LS5	NA5	A5	LA5	S/M	30/32
	S6	NA6	A6	LA6	M/L	32/34/36
	LS6	LS6	A6	LA6	M/L	32/34/36
Rettangolare	ST4	NA4	A4		S	30
	ST5	NA5	A5	LA5	S/M	30/32
	LT5	NA5	A5	LA5	S/M	30/32
	ST6	NA6	A6	LA6	M/L	32/34/36
	LT6	NA6	A6	LA6	M/L	32/34/36
Ovale	O4	NA4	A4		S	30
	O5	NA5	A5	LA5	S/M	30/32
	LO5	NA5	A5	LA5	S/M	30/32
	O6	NA6	A6	LA5	M/L	32/34/36
	LO6	NA6	A6	LA6	M/L	32/34/36

Nelle tabelle precedenti sono riportati consigli per le combinazioni. Naturalmente è possibile combinare anche individualmente i denti anteriori Veracia completamente anatomici con i denti posteriori Veracia SA semi-anatomici, in base al caso clinico.

* VITA è un marchio registrato da VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania..

