



Niedrigschmelzende Schichtkeramik
für Lithiumdisilikat und Zirkonoxid




Fluoreszierende Verblendkeramik für nahezu jede ästhetische Herausforderung


Dank ihrer homogenen, mikrofeinen Partikelstruktur ist die fluoreszierende, silikatglasbasierte Schichtkeramik VINTAGE LD gleichermaßen abgestimmt auf das Verblenden von Restaurationen aus Lithiumdisilikat und aus Zirkonoxid.

Die Massen sind leicht zu verarbeiten und aufgrund ihrer dynamischen Lichtstreuung ideal für die hochästhetische Vollverblendung oder die Cut-Back-Technik. VINTAGE LD wird bei einer Temperatur von lediglich ca. 760-770 °C bei Gerüsten aus Lithiumdisilikat sowie aus Zirkonoxid gebrannt. Durch den abgestimmten Wärmeausdehnungskoeffizienten ist ein Verzug des Gerüsts damit praktisch ausgeschlossen und die Farbe bleibt selbst nach mehreren Bränden stabil.

Vollverblendung auf Lithiumdisilikat

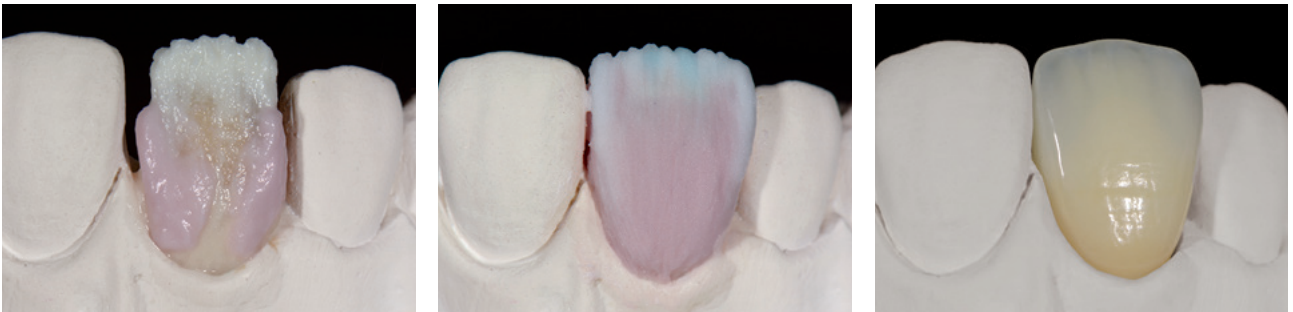

Cut-Back-Technik auf Zirkonoxid

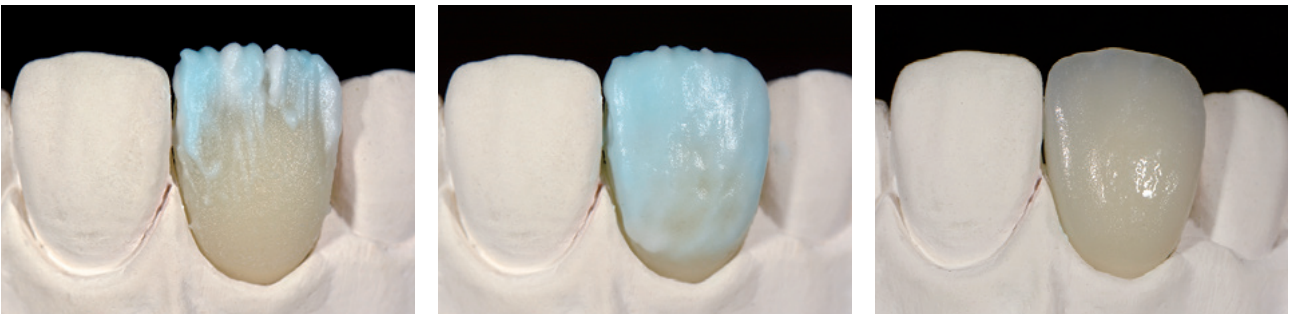

Highlights

- EINE Keramik für Gerüste aus Lithiumdisilikat und Zirkonoxid
- Bewährte Ästhetik durch dynamische Lichtstreuung und Fluoreszenz
- Verlässliche Farbstabilität, auch nach mehreren Bränden
- Erhöhte Oberflächenglätte und -dichte durch mikrofeine Partikelstruktur
- Brenntemperatur bis zu 770 °C verhindert Gerüstverzug
- Für Vollverblendungen und Cut-Back-Technik anwendbar

Modulares Farbsystem

Das Farbangebot von VINTAGE LD ist mit aufeinander abgestimmten Einzelmassen modular aufgebaut. Ein umfangreiches Angebot an transluzenten Effekt- und Inzisalmassen inkl. Whitening-Farbtönen ergänzt die Basis-Schichtmassen und macht das System zur ganzheitlichen Lösung für jede ästhetische Herausforderung. Wählen Sie für die Gestaltung gingivaler Bereiche aus fünf GUM-Color Farbtönen aus.

Farbe	W1	W2	W3	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
OPAQUE DENTIN	—		OD-A1: OD-N = 1:1	OD-A1	OD-A2	OD-A3	OD-A3,5	OD-A4	OD-B2: OD-N = 1:1	OD-B2	OD-B2: OD-B4 = 1:1	OD-B4	OD-C2: OD-N = 1:1	OD-C2	OD-C2: OD-C4 = 1:1	OD-C4	OD-D3: OD-N = 2:1	OD-D3	OD-D3: OD-B4 = 1:1
BODY	—		W3B	A1B	A2B	A3B	A3,5B	A4B	B1B	B2B	B3B	B4B	C1B	C2B	C3B	C4B	D2B	D3B	D4B
OPAL ENAMEL	OPAL 56	OPAL 56: OPAL 57 = 2:1	OPAL 56: OPAL 57 = 1:1	OPAL 57	OPAL 58	OPAL 59	OPAL 60	OPAL 60	OPAL 57	OPAL 58	OPAL 59	OPAL 60	OPAL 58	OPAL 59	OPAL 60	OPAL 60	OPAL 57	OPAL 58	OPAL 59

OPAQUE DENTIN	OD-N																		
OPAL ENAMEL	OPAL 56	OPAL 57	OPAL 58	OPAL 59	OPAL 60														
ENAMEL EFFECT	T	T-Glass	OPAL T	OPAL SL	BT	PT	GT	YT	OT	AM-Y									

GUM COLOR	GUM-1	GUM-2	GUM-3	GUM-4	GUM-5
CORRECTION	ADD-ON B	ADD-ON T	—	—	—

Die Basis-Farben entsprechen dem VITA Classical Farbsystem. VITA ist ein eingetragenes Warenzeichen der VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen.

Fantastisches Finish

In Kombination mit den VINTAGE Art Universal Malfarben und Glasurmassen von SHOFU erreichen Sie ergänzend einfach und zielsicher die Nachbildung jeder natürlichen Zahncharakteristik – von der klassischen Bemalung und Glasur bis hin zu ausdrucksstarken 3D-Effekten.

Die Pulvermalfarben basieren auf einem niedrigschmelzenden Glas und einer Pigment-technologie mit mikrofeiner Partikelstruktur. Mit minimalem Aufwand schaffen Sie durch einfaches Bemalen der Restauration fantastische Ergebnisse mit der Illusion räumlicher Tiefe und Vitalität.

VINTAGE
Art
Universal



Technische Daten

Merkmal	Wert
Brenntemperatur Lithiumdisilikat	760-770 °C
Brenntemperatur Zirkonoxid	760-770 °C
Lineare Ausdehnung WAK (25-500 °C)	9,0 ± 0,5 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Glasumwandlungstemperatur	510 ± 20 °C
Biegefestigkeit	115 MPa
Chemische Löslichkeit	< 5 (µg/cm ²)

Klassifizierung nach DIN EN ISO 6872: Typ 1, Klasse 1

Bestellinformationen

Farbe	REF 20 g
VINTAGE LD	
OPAQUE-DENTIN OD-A1	8550EU
OPAQUE-DENTIN OD-A2	8552EU
OPAQUE-DENTIN OD-A3	8553EU
OPAQUE-DENTIN OD-A3,5	8554EU
OPAQUE-DENTIN OD-A4	8555EU
OPAQUE-DENTIN OD-B2	8556EU
OPAQUE-DENTIN OD-B4	8557EU
OPAQUE-DENTIN OD-C2	8558EU
OPAQUE-DENTIN OD-C4	8559EU
OPAQUE-DENTIN OD-D3	8560EU
OPAQUE-DENTIN OD-N	8562EU
BODY A1B	8570EU
BODY A2B	8571EU
BODY A3B	8572EU
BODY A3,5B	8573EU
BODY A4B	8574EU
BODY B1B	8575EU
BODY B2B	8576EU
BODY B3B	8577EU
BODY B4B	8578EU
BODY C1B	8579EU
BODY C2B	8580EU
BODY C3B	8582EU
BODY C4B	8583EU
BODY D2B	8584EU

Farbe	REF 20 g
VINTAGE LD	
BODY D3B	8585EU
BODY D4B	8586EU
BODY W3B	8587EU
ENAMEL Opal 56	8590EU
ENAMEL Opal 57	8592EU
ENAMEL Opal 58	8593EU
ENAMEL Opal 59	8594EU
ENAMEL Opal 60	8595EU
ENAMEL Opal T	8596EU
ENAMEL Opal SL	8597EU
ENAMEL-EFFECT T-Glass	8598EU
ENAMEL-EFFECT BT	8599EU
ENAMEL-EFFECT PT	8600EU
ENAMEL-EFFECT GT	8602EU
ENAMEL-EFFECT YT	8603EU
ENAMEL-EFFECT OT	8604EU
ENAMEL-EFFECT AM-Y	8605EU
ENAMEL-EFFECT T	8606EU
GUM Gum-1	8650EU
GUM Gum-2	8652EU
GUM Gum-3	8653EU
GUM Gum-4	8654EU
GUM Gum-5	8655EU
CORRECTION ADD-ON B	8660EU
CORRECTION ADD-ON T	8662EU